

# surgery.



**MULTILINEA AVANTI AC+ E AC.  
TAVOLI OPERATORI MOBILI E POLTRONE DI RECUPERO PER LA CHIRURGIA AMBULATORIALE.**

Coppia di potere  
per l'uso in  
e dintorni

la sala operatoria!



**GREINER**

# surgery.



## GREINER MEDBEST: DISPOSITIVI MEDICI MADE IN GERMANY.

In risposta ai desideri dei pazienti e di coloro che li curano, GREINER ha accettato la sfida di sviluppare soluzioni innovative che rispondano in egual misura alle esigenze cliniche ed economiche. Made by GREINER significa prodotto in Germania. Nello sviluppo e nella produzione delle sedie GREINER viene applicato uno standard costantemente elevato. Lo stesso vale per la nostra gamma di servizi. Raggiungiamo questo obiettivo traducendo il nostro gusto per l'innovazione in processi completamente automatizzati e qualità artigianale. Gli elevati standard di design, materiali, ingegneria ed ergonomia combinati con la flessibilità orientata al cliente fanno di GREINER un partner per clienti attenti alla qualità ai massimi livelli.

## NUOVO CONCETTO DI PIATTAFORMA AC+ E AC PER LA CHIRURGIA AMBULATORIALE.

La chirurgia ambulatoriale è al centro dell'attenzione oggi. Flessibilità, precisione nei tempi e nella movimentazione, mobilità e sicurezza determinano il quadro delle cliniche, dei centri operatori, dei centri di assistenza medica e degli studi specializzati. Allo stesso tempo, si tratta di efficienza nell'uso dello spazio e di economia. In breve: i pazienti dovrebbero essere coinvolti con precisione nei processi prima, durante e dopo l'intervento. In questa moderna forma di attività ospedaliera, i letti ospedalieri ingombranti rendono la vita inutilmente difficile alle équipes. C'è una richiesta di sedie che possano accogliere i pazienti nel "verde" con grande flessibilità e stabilità, trasportarli in modo sicuro e confortevole in sala operatoria, essere utilizzate come tavolo operatorio o consentire il riposizionamento ergonomico ed essere utilizzate per spostare i pazienti in modo sicuro e confortevole alla sala risveglio dopo l'operazione. Esattamente il lavoro per le sedie GREINER MULTILINE NEXT AC+ e AC.

**MULTILINE AVANTI AC+**  
Sedia da trasporto mobile e tavolo operatorio con accessori versatili



**MULTILINE PROSSIMA AC**  
Sedia mobile da trasporto e sveglia con eccellente comfort quando si è seduti o sdraiati



## TAVOLI OPERATORI MOBILI E POLTRONE DI RECUPERO.

MULTILINE NEXT AC+ e AC soddisfano esattamente i requisiti che oggi vengono posizionati sui tavoli mobili dentro e intorno alla sala operatoria. Per gli interventi sulla testa, sul viso e sugli arti superiori, con AC+ sono necessarie soluzioni flessibili in grado di supportare completamente i pazienti prima e durante l'operazione. Nell'ambiente operatorio generale, invece, l'AC offre il massimo comfort sia in sala operatoria che per il relax in sala risveglio, con un supporto perfetto per il riposizionamento ergonomico.

### GREINER in chirurgia ambulatoriale:

- Chirurgia maxillo-facciale, orale, plastica e dermatologica, ORL, oftalmologia, ortopedia e molto altro
- Preparazione all'intervento chirurgico, sala di riposo e risveglio postoperatorio in chirurgia, esame, trattamento, mobilizzazione, trasporto
- Regolazione elettrica motorizzata dello schienale, del sedile e della sezione gambe, nonché dell'altezza e del sollevamento in altezza fino a 90 cm
- Batteria, staffa, ruote e telaio intercambiabili per l'uso mobile
- Interruttore a pedale di emergenza per la posizione Trendelenburg, il personale ha le mani libere
- Sicurezza del prodotto affidabile e certificata in modo indipendente

Efficiente,  
flessibile,  
stabile e  
al sicuro nel  
O!



## TAVOLO OPERATORIO MOBILE MULTILINE NEXT AC+.

Il mondo in sala operatoria sta cambiando e con esso anche i tavoli. L'implementazione di flussi di lavoro integrati in sala operatoria definisce la necessità di soluzioni ergonomiche a tutto tondo che siano completamente mobili e non richiedano il riposizionamento del paziente. Il MULTILINE NEXT AC+ corrisponde esattamente a questo profilo - con una sezione posteriore corta, un posizionamento e un posizionamento stabili del paziente, barre standard tutt'intorno e poggiatesta intelligenti e rapidamente intercambiabili. Motori potenti, alimentati da una potente batteria, supportano il lavoro delle équipes operatorie. Viene fornito un accesso ergonomico attorno alla parte superiore del corpo del paziente, il poggiatesta ergonomico fornisce un supporto sicuro. Il sistema intelligente del poggiatesta consente un adattamento flessibile ad ogni esigenza.



Posizione di gravità zero/relax



Sollevarlo a gravità zero/altezza



Posizione piana/letto

## MULTILINE AVANTI AC+

Insieme ai chirurghi e agli specialisti di apparecchiature operatorie, GREINER medbest ha sviluppato questa poltrona innovativa che definirà gli standard all'interno e all'esterno della sala operatoria:

- Tavolo operatorio mobile con sezione posteriore corta e rinforzo di stabilità nella parte posteriore per un posizionamento stabile e confortevole del paziente
- Utilizzabile in modo flessibile per interventi minimamente invasivi in chirurgia plastica, dermatologica, maxillo-facciale, ORL, oftalmologia e in molte altre discipline specialistiche
- Dotato di 4 motori, barra standard superiore in acciaio inox, poggiatesta Ergo con doppio snodo Vario e sistema di bloccaggio centralizzato per le doppie ruote piroettanti
- Accessori versatili adatti alle sale operatorie: barre standard a tutto tondo in acciaio inossidabile per l'aggancio di accessori clinici, coperture elettricamente conduttive, batteria sostitutiva con stazione di ricarica a parete, tavolo operatorio braccio-mano e supporto per gambe Goepel.
- Sistema poggiatesta GREINER:**Poggiatesta Ergo con doppio snodo Vario per interventi chirurgici con una sola mano, attacco rapido Quick Assist per poggiatesta intercambiabili e cuscini elastici individuali, a calotta intera e semisferica, ciascuno con attrezzatura Quick Assist.



## GREINER MEDBEST NELLA OR

Quando si tratta di precisione, la fiducia nelle caratteristiche della prestazione clinica è decisiva.

ELASTICIZZAZIONE DEL POGGIATESTA  
Estensione della schiena con il massimo comfort



## TAPPO SFERICO COMPLETO

Posizionamento per la zona della testa e del collo adatta all'intervento chirurgico



## MEZZA TAPPO SFERICO

Posizionamento speciale per procedure selezionate e piccoli pazienti



## MULTILINEA AVANTI AC+

Questo tavolo apporta grandi progressi in termini di ergonomia e comfort di trattamento in sala operatoria:

- Sedia mobile flessibile che soddisfa i requisiti di un tavolo operatorio
- Braccioli completamente retrattili, affiancati, accesso perfetto per l'équipe operatoria
- Regolazione elettromotrice dello schienale, del sedile e delle sezioni delle gambe, nonché del sollevamento in altezza, interruttore a pedale di emergenza per la posizione Trendelenburg
- La sedia può essere imbarcata a 58 cm e sollevata fino a 90 cm in posizione piana, come i tavoli operatori convenzionali
- Interruttore a pedale e ampio spazio per le gambe intorno alle ore 12 per l'accesso per operazioni nella zona della testa, del collo e delle spalle - sedie da lavoro GREINER abbinata
- Sistema poggiatesta con doppio snodo ed aggancio rapido, meccanismo di sostegno per il funzionamento a mani libere
- Tutti i componenti dell'area clinica in acciaio inossidabile
- Perfetto per l'igiene grazie alle ampie superfici, veloce da disinfettare senza materasso separato




### AMBITO DI APPLICAZIONE

Procedure chirurgiche minimamente invasive sulla pelle e sugli arti (ad esempio, chirurgia della mano) direttamente sul tavolo.



I poggiatesta possono essere cambiati in modo rapido e sicuro e fissati con l'attacco rapido Quick assist

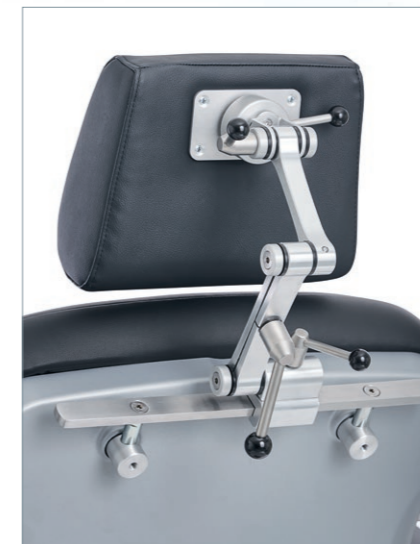

Barra standard orizzontale sulla parte superiore dello schienale per fissare l'eventuale poggiatesta



Grazie al doppio snodo Vario è possibile raggiungere qualsiasi posizione desiderata in pochi secondi, con una mano

Comodo  
E  
ergonomico  
attorno a  
O!



MULTILINE NEXT AC soddisfa esattamente i requisiti posti al posizionamento e alla mobilitazione del paziente con il numero in rapida crescita di interventi ambulatoriali.



Il ponte di montaggio per applicazioni, montato sulla parte posteriore, può essere utilizzato per fissare il supporto per bombola di ossigeno (accessorio).

Pulsantiera con guida operatore intelligente: simboli comprensibili a livello internazionale, pulsanti con impostazioni di base ergonomiche e di emergenza per posizioni sedute, rilassanti e Trendelenburg, nonché distesi. La sicurezza è garantita dalla serratura magnetica e dal display dello stato della batteria.



Posizionamento ginecologico, supporto gamba Goepel sulle barre standard laterali, regolazione continua dell'altezza e dell'inclinazione del paziente.



## MOBILE O SEDIA DA TAVOLO E RECUPERO MULTILINE NEXT AC.

Il focus di questo tavolo mobile, che viene utilizzato in molte cliniche come sedia per il riposo e il risveglio, è nella preparazione all'intervento e nella sala di risveglio. I luoghi di applicazione ideali includono la preparazione per gli interventi chirurgici, il trasporto da e verso gli interventi chirurgici, il posizionamento dopo le procedure e la sala di recupero dopo l'anestesia: ergonomia, funzionalità, mobilità e comfort per i pazienti si combinano in questa soluzione unica di sedia e letto. Una batteria potente e motori ad alte prestazioni svolgono un lavoro straordinario per la sala operatoria e le squadre infermieristiche che svolgono il loro lavoro. Per quanto riguarda l'igiene, è possibile garantire facilmente un accesso perfetto e una facile disinfezione. E anche dove in situazioni critiche non c'è spazio per i classici letti ospedalieri, il letto MULTILINE NEXT AC è lì per aiutare negli spazi più piccoli.

La poltrona paziente mobile MULTILINE NEXT AC offre un comfort eccezionale sia seduto che reclinato in tutte le situazioni. Dalle posizioni sedute e relax alla posizione del letto piano e alla posizione Trendelenburg di emergenza, il divano si sposta rapidamente e senza intoppi in qualsiasi posizione richiesta o preferita con il semplice tocco di un pulsante.



Accesso facilitato per il paziente ad altezze di 58-90 cm



Chiusura centralizzata/stabilità direzionale



Interruttore a pedale di emergenza



Ruote da 12,5 cm, mobilità perfetta



Facilità di accesso alla potente batteria ricaricabile



Posizione seduta



Posizione di gravità zero/relax



Posizione del letto



Posizione shock/Trendelenburg

## MULTILINEA AVANTI AC+

**Igiene**  
Conformità alle linee guida più severe, accesso perfetto, finitura superficiale pulita, superfici testate, numero minimo di cuciture

**Comodità seduta e sdraiata**  
Comoda fodera per cuscino larga 60 cm per pazienti di altezza e peso fino a 220 kg

**Scelta dei poggiatesta**  
Ergo, senza/con doppio snodo Vario, attacco rapido Quick Assist, rivestimento intercambiabile e calotte sferiche complete e mezze per Quick Assist

**Fissaggio**  
Sistema di barre standard circonferenziali in acciaio inossidabile sulle parti posteriori e laterali


**Ergonomia**  
Imbottitura a filo senza spazi, nonché braccioli fissabili e retrattili per un accesso diretto e una facile riorganizzazione

**Stabilità**  
Carico elevato fino a 220 kg, movimentazione sicura quando trasportare pazienti

**Mobilità**  
Ruote piroettanti da 12,5 cm per spostamenti confortevoli, sistema di frenatura centrale

**Spazio minimo requisiti**  
Posizione vera e propria poltrona con inclinazione della sezione gambe di 90°, salibile ad un'altezza di 58 cm


**Fare strada**  
Una ruota regolabile per una mobilità perfetta quando si corre in rettilineo

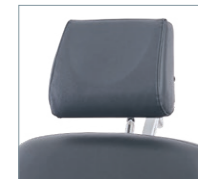


Poggiatesta Ergo con Doppio snodo Vario



Tappezzeria intercambiabile allungare per l'assistenza rapida

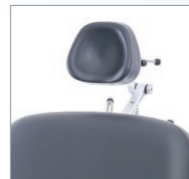


Calotta sferica completa per Quick Assist

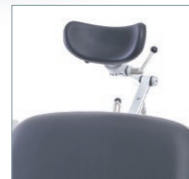

Tappo semisferico per Quick Assist



Cambia con Quick assistere l'accoppiamento rapido

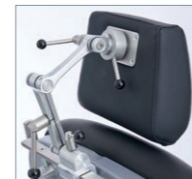

Qualsiasi posizione può essere fissata con un doppio snodo Vario



Braccioli completamente retrattile



Barre standard per accessori clinici



Supporto Goepel per ginecologia



Il tavolo paziente può essere fisso e ruotato



Interruttore a pedale per chirurgia ergonomica a mano libera



Batteria di riserva sulla stazione di ricarica a muro

### MULTILINE NEXT AC+ - attrezzature/accessori

-Versione con schienale corto e poggiatesta Ergo con doppio snodo Vario, barra standard in acciaio inox nella parte superiore, 4 motori per l'impostazione delle funzioni, chiusura centralizzata, batteria ad alte prestazioni, interruttore a pedale/ interruttore di emergenza, tutte le coperture e pannelli in plastica in bianco.

#### Accessori

- MULTILINE NEXT AC+ in tessuto premium - scelta tramite cartella colori
- Copertura elettricamente conduttiva EL 11 (nera)
- Poggiatesta e poggiatesta sostituibili
- Barre standard in acciaio inox
- Batteria di ricambio e stazione di ricarica da parete
- Barra per infusione e supporto - girevole
- Tavolo paziente
- Interruttore a pedale e supporto per interruttore a pedale
- Supporto Goepel incl. fissaggio pistoni
- Tavolo operatorio per chirurgia del braccio/mano

### Dimensioni e dati tecnici

-Sedia in posizione verticale (spazio sul pavimento)	107x77 centimetri
-Posizione reclinata (spazio sul pavimento)	200 x 77 cm
-Larghezza totale	77cm
-Superficie in posizione reclinata(L x P)	193 x 60 cm (incl. poggiatesta)
-Spessore dell'imbottitura	9 cm
-Bracciolo (L x L)	73x7 cm
-Altezza di accesso	58cm
-Regolazione altezza	32 centimetri (58 - 90 centimetri)
-Diametro delle ruote	12,5 cm (1 x direzionale)
-Schienale	- Da 5° a 78°
-Sezione sedile	Da 0° a 22°
-Sezione delle gambe	Da 0° a 90°
-Peso massimo del paziente	220 chilogrammi
-Voltaggio	100-240 V/50-60 Hz
-Prestazioni della batteria	24 V CC, 1 x 2,9 Ah(fino a 40 movimenti)
-Peso del divano	128 chilogrammi

## MULTILINEA PROSSIMA AC

**Igiene**  
Conformità alle linee guida più severe, accesso perfetto, finitura superficiale pulita, superfici testate, numero minimo di cuciture

**Comodità seduta e sdraiata**  
Comoda imbottitura larga 60 cm per i tempi di attesa e di risveglio pre e post operatorio

**Tavolo paziente**  
Rapidamente e facilmente risolto con a titolare separato

**Spazio minimo requisiti**  
Posizione vera e propria poltrona con inclinazione della sezione gambe di 90°, salibile ad un'altezza di 58 cm

**Fare strada**  
Una ruota regolabile per una mobilità perfetta quando si corre in rettilineo



**Flessibilità**  
Portabarra per infusione può essere ruotato a sinistra e a destra con una sola mano

**Ergonomia**  
Imbottitura a filo senza spazi e braccioli fissabili e retrattili per un facile riposizionamento prima e dopo l'operazione

**Stabilità**  
Carico elevato fino a 220 kg, movimentazione sicura quando trasportare pazienti

**Mobilità**  
Ruote piroettanti da 12,5 cm per spostamenti confortevoli, sistema di frenatura centrale



Cuscino per la testa, relax cuscino o paranuca



Gommato maniglia di spinta



Barra per infusione nel supporto girevole



Braccioli completamente retrattile



Tavolo paziente sul supporto laterale



Tavolo paziente nella parte posteriore durante il trasporto



Barre standard per accessori clinici



Supporto Goepel per ginecologia



Bombola di ossigeno nel supporto sul retro



Interruttore a pedale per chirurgia ergonomica a mano libera



Batteria di riserva sulla stazione di ricarica a muro



Scelta versatile di rivestimenti e cuscini

### MULTILINE NEXT AC - equipaggiamenti/accessori

-Versione con 4 motori per l'impostazione delle funzioni, chiusura centralizzata, batteria ad alte prestazioni, interruttore a pedale/interruttore di emergenza, tutte le coperture e i pannelli in plastica di colore bianco.

#### Accessori

- MULTILINE NEXT AC in tessuto premium - scelta tramite cartella colori
- Copertura elettricamente conduttiva EL 11 (nera)
- Cuscini e poggiatesta
- Barre standard e ponte di montaggio in acciaio inox
- Batteria di ricambio e stazione di ricarica da parete
- Barra per infusione e supporto - girevole
- Tavolo paziente
- Supporto per bombola di ossigeno, in connessione con ponte di montaggio
- Interruttore a pedale e supporto per interruttore a pedale
- Supporto Goepel incl. fissaggio pistoni
- Tavolo operatorio per chirurgia del braccio/mano

### Dimensioni e dati tecnici

-Sedia in posizione verticale (spazio sul pavimento)	107x77 centimetri
-Posizione reclinata (spazio sul pavimento)	200 x 77 cm
-Larghezza totale	77cm
-Superficie in posizione reclinata(L x L)	200 x 60 cm
-Spessore dell'imbottitura	9 cm
-Bracciolo (L x L)	73x7 cm
-Altezza di accesso	58cm
-Regolazione altezza	32 centimetri (58 - 90 centimetri)
-Diametro delle ruote	12,5 cm (1 x direzionale)
-Schienale	- Da 5° a 78°
-Sezione sedile	Da 0° a 22°
-Sezione delle gambe	Da 0° a 90°
-Peso massimo del paziente	220 chilogrammi
-Voltaggio	100-240 V/50-60 Hz
-Prestazioni della batteria	24 V CC, 1 x 2,9 Ah(fino a 40 movimenti)
-Peso del divano	128 chilogrammi



## we design quality.

Le sedute piacevoli e salutarci ci motivano dal 1922. Da decenni produciamo divani di alta qualità e tecnicamente sofisticati all'interno della gamma medbest. I nostri dispositivi innovativi per esami, dialisi, oncologia, prelievi di sangue, cure e trasporti sono tutti realizzati in Germania. Il nostro impegno per la qualità è verificato da un sistema di garanzia della qualità verificato da un organo indipendente: GREINER è certificato secondo DIN EN ISO 9001 e 13485.



Marchio di prova per  
sistema di gestione della qualità



GREINER GmbH  
Wettestrasse 1 · 74385 Pleidelsheim · Germania T +49  
7144 81120 · F +49 7144 8112 99 info@greiner-  
gmbh.de · www.greiner-gmbh.de